


Utiliser un outil: le microscope

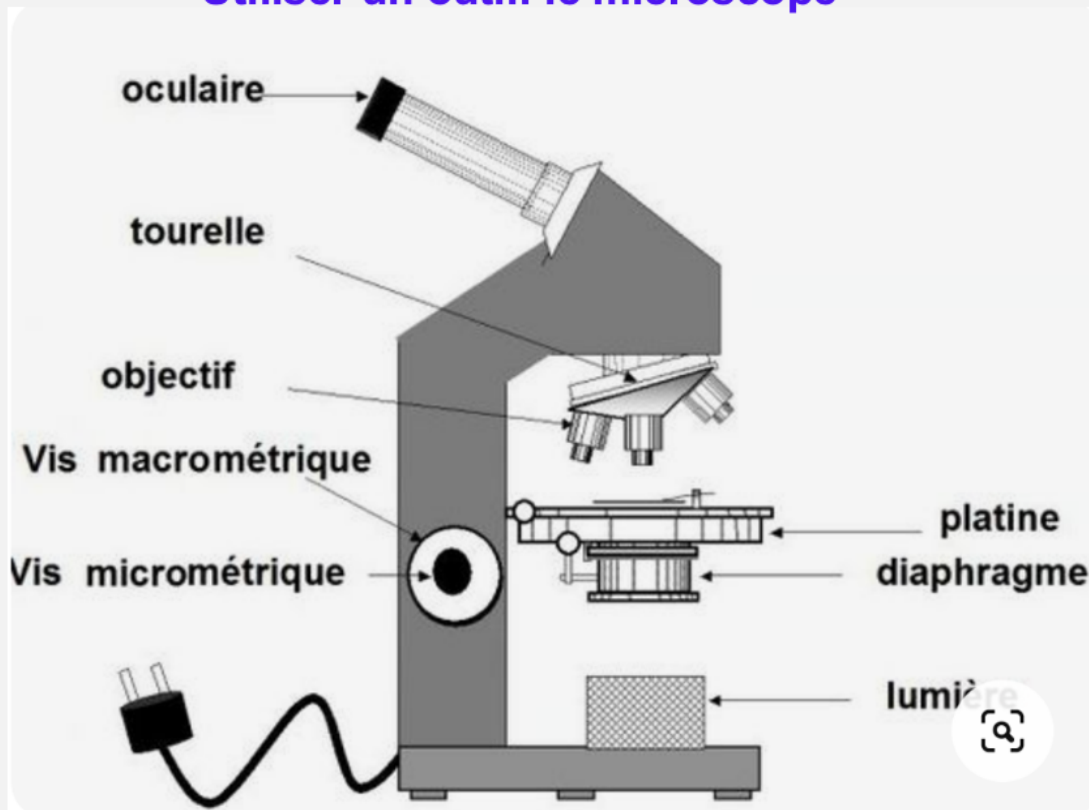

Vis macrométrique = grosse vis

Vis micrométrique = petite vis

Pour observer :

- 1- Commencer par le plus petit grossissement. Pour cela :
 - brancher le microscope
 - mettre la platine en bas (avec la grosse vis)
 - mettre le plus petit objectif au dessus du trou de la platine
 - poser la lame sur la platine
 - allumer la lumière.
 - remonter la platine avec la grosse vis jusqu'à obtenir une image nette (c'est faire la « mise au point »)
- 2- Pour grossir l'image : changer l'objectif (mettre le moyen) et refaire la mise au point avec la petite vis.
- 3- pour grossir encore, mettre l'objectif le plus puissant et faire la mise au point UNIQUEMENT avec la petite vis.

Pour calculer le grossissement :

Il faut multiplier le numéro de l'oculaire par celui de l'objectif.

